
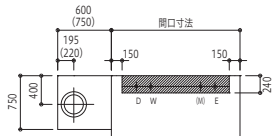
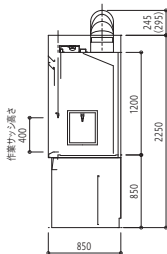


【外形図】 内部有効寸法(mm) W：外寸-150×D：615×H：1200

【配管立上り位置】 据付天井高 >2700mm

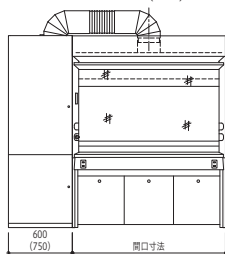

W：給水 20A
D：排水 40A
E：電気 AC100V 20A×1回路
(M)：その他 圧空・窒素・真空他
(オプション)

1. 上記斜線内に配管を立上げてください。
2. 運転信号、増設コンセント、ファン電源は別途お打合せとなります。
3. スクラパーユニット設置床面には配管を立上げないでください。
4. カッコ内寸法は1800Wを示します。