
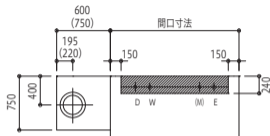
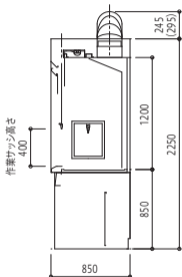


外形図

内部有効寸法 (mm) W:外寸-150×D:615×H:1200

配管立上り位置

据付天井高 > 2700mm

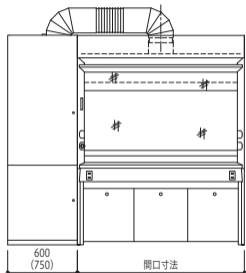

W : 給水 20A
 D : 排水 40A
 E : 電気 AC100V 20A×1回路
 (M) : その他 圧空・窒素・真空他
 (オプション)

1. 上記斜線内に配管を立上げてください。
2. 運転信号、増設コンセント、ファン電源は別途お打合せとなります。
3. スクラバーユニット設置床面には配管を立上げないでください。
4. カッコ内寸法は1800Wを示します。